


L-Varlock インプラントサイズ


ノーマルケージ

カタログNo.	幅×長さ(W×L)	高さ(H)
VAL-CA-10-08	10×22mm	8mm
VAL-CA-10-09		9mm
VAL-CA-10-11		11mm
VAL-CA-10-13		13mm

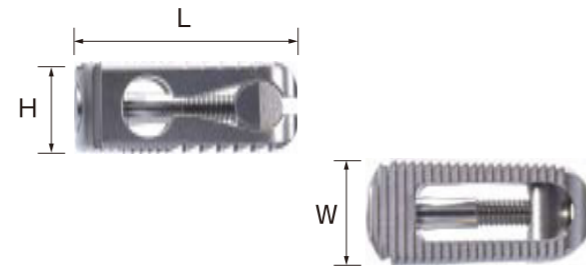

ワイドケージ

カタログNo.	幅×長さ(W×L)	高さ(H)
VAL-CA-13-08	13×27mm	8mm
VAL-CA-13-09		9mm
VAL-CA-13-11		11mm
VAL-CA-13-13		13mm

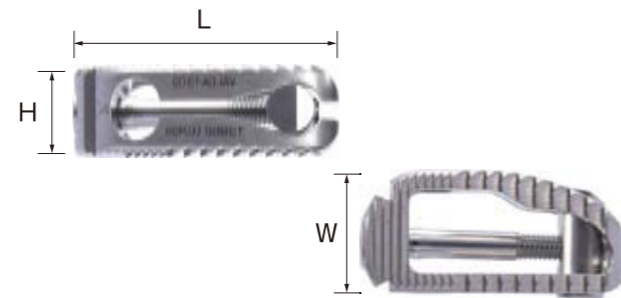

L-Varlock

Lumbar Expandable Interbody Fusion Cage



(販売名:L-バルロック)
医療機器承認番号:20700BZY00470000

製造販売業者 **KISCO株式会社**

【製造販売業許可番号/28B1X10004】

本社 〒650-0047 神戸市中央区港島南町5-3-6
TEL(078)306-2288 FAX(078)306-2289

<http://www.kisco.jp/>




Fit in Anatomical Structure

Optimum Fit

ケージはノーマル、ワイドの2タイプがあり、それぞれ4サイズから選択することができます。

またケージの前方部を開大させることができるため、コンパクトに挿入した後、椎間の前弯角*に適合させることができます。

*ケージは最大7回転でノーマルは約12.5°まで、ワイドは約8°まで開大させることができます。

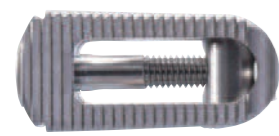


ノーマル



ワイド

適応症例


変性椎間板疾患
L2~S1の椎間固定

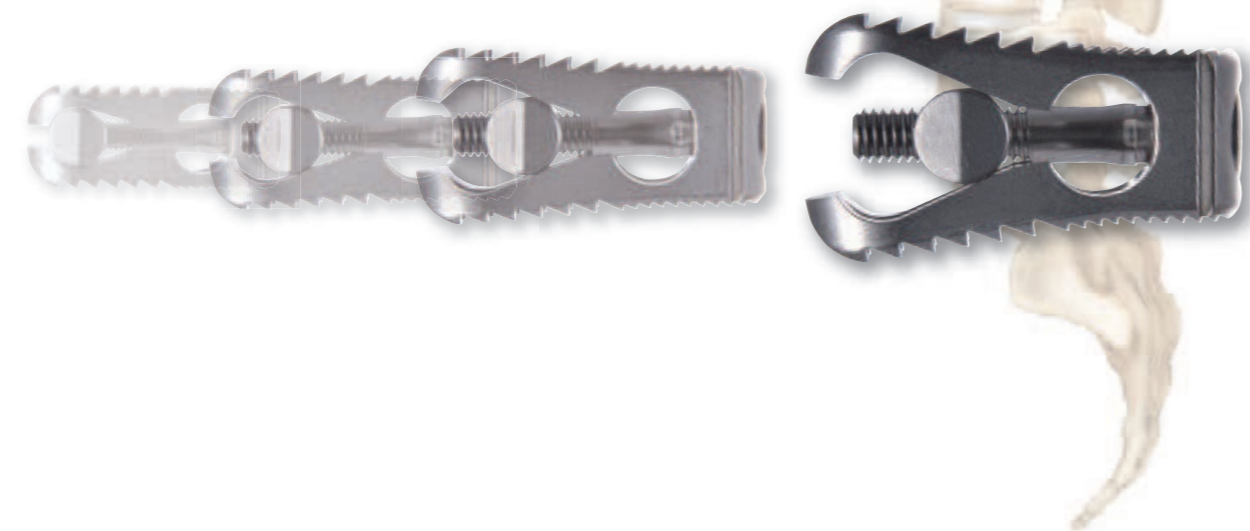

To Enhance Bony Fusion

Saw Blade Surface

ケージの上下表面は鋸刃状となっており、バックアウトを防ぎ、初期固定性を高めます。

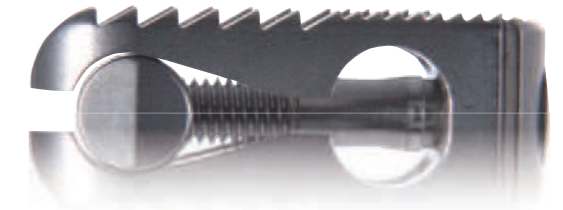

Large Bone Graft Window

骨充填ウィンドウを可能な限り最大化した構造により、骨癒合率の向上が期待できます。



Easy Insertion

Smooth Round Nose

ケージの先端がラウンド状になっており、椎間腔への挿入が容易になります。

